

NICAL SMART MICRO



Güç ve PC bağlantıları arka yüzünde bulunur.

LED çalışma göstergesi, işlem aşamalarını gösterir.

Bir görüntü plakası taratmak için giriş. Işık ve parmakların temasını ortadan kaldırır.



SMART MICRO:
Küçük ve yenilikçi, kapsamlı otomatik fonksiyonlar sunar.

Radyolojik görüntüleme alanındaki 30 yıllık tecrübesi ile NİCAL SMART MICRO, yüksek kaliteli özelliklerde, küçük boyutlu ve performanslı diş plaka okuyucusunu sunar.

- Tamamen otomatik fonksiyonlar
- Yüksek kaliteli görüntü
- Uzun ömürlü görüntüleme plakaları.

SMART MICRO otomatik tarama, okuma, silme ve plaka iade işlemlerini tamamen otomatik olarak yapar.

Plaka lambası veya parmak teması varlığı olmadan koruyucu kapak otomatik olarak kaldırılır.

Okuma fonksiyonu 10 kez yanlış doz kullanılsa bile yüksek görüntü kalite seviyesi sunmaktadır.

Görüntüleme plaka sisteminin kablolu sistemlere göre avantajları:

- Film benzeri iş akışı
- Kablosuz tasarımıyla kolay pozisyonlandırılır
- Farklı kullanım modları için 4 boyutta plakalar mevcuttur.
- Tek kullanımlık sızdırmaz hijyen poşetler ile gelişmiş sterilite.

Teknik veriler	
Cözünürlük	34 pixel/mm - 16 BITS
Nokta boyutu	30 µ
Okuma süresi	4.8 ± 9 Sec.
Bağlantı tipi	USB2
Boyutlar (HxWxD)	110x154x270 mm
Ağırlık	4,6 kg
Güc değerleri	110±240 V 50/60 Hz 24 Watts
Yazı boyutu	Auto set-up
Yazılım	Nical image Plus / Dicom (Opsiyon)

**NICAL SMART MICRO:
KULLANICI DOSTU**

- Küçük boyutlu
- Kullanmaya hazır
- Hiç bir tuş yoktur

VERİMLİ

- Tarar, okur, siler ve plakayı geri verir
- Dahili kapak plakayı kaldırır

PLAKA VE ÇOK YÖNLÜ

- Kablosuz sensörler
- Basit konumlandırma
- Mevcut 4 boyut
- Yeniden kullanılabilir plaklar

Kompakt SMART MICRO
Ağız içi dental görüntüleme cihazının tüm avantajlarını sunar


Görüntü levhalarının aktif alanı
%100' dür.

Koruma kapağı ve tek kullanımlık
torbaların aşağıda gösterilen plakalar
için tüm boyutları mevcuttur.

Boyut 0
31x22 mm
726x1024 pixel

Boyut 1
40x24 mm
792x1321 pixel

Boyut 2
41x31 mm
1024x1354 pixel

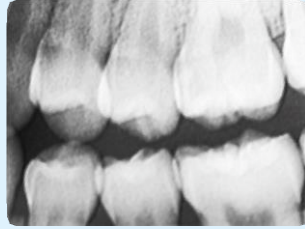

Boyut 3
54x27 mm
891x1783 pixel

NICAL IMAGE PLUS yazılımı, görüntülerin elde edilmesini, işlenmesini ve kalitesinin geliştirilmesini sağlar. DICOM ağı ile uyumludur.

Yüklemeye hazır ve yapılandırılmış yazılım, NICAL SMART MICRO'nun her zaman kullanıma hazır olmasını sağlar.

NICAL IMAGE PLUS yazılımı için gereken minimum PC gereksinimleri	
İşlemci	Intel® 32/64 bit dual core
Hafıza (Min.)	> 1 GigaByte
Ekran boyutu	17"/19"
Ekran çözünürlüğü	1280x1024
Video hafızası	128 Megabyte
Hard Disk (Min.)	>100 GByte
Windows® gereklilikleri	(XP, VISTA, 7, 8)



NICAL SPA

Via Soffredini, 43 - 20126 Milano Italy
Phone +39 022571110 - Fax +39 022572207
nical@nical.com - www.nical.com



NICAL SMART MICRO

